


KARTA POMIAROWA na indywidualne zamówienie ortez dziecięcych

ID PACJENTA _____

KOD PRODUKTU _____

NOTATKI _____

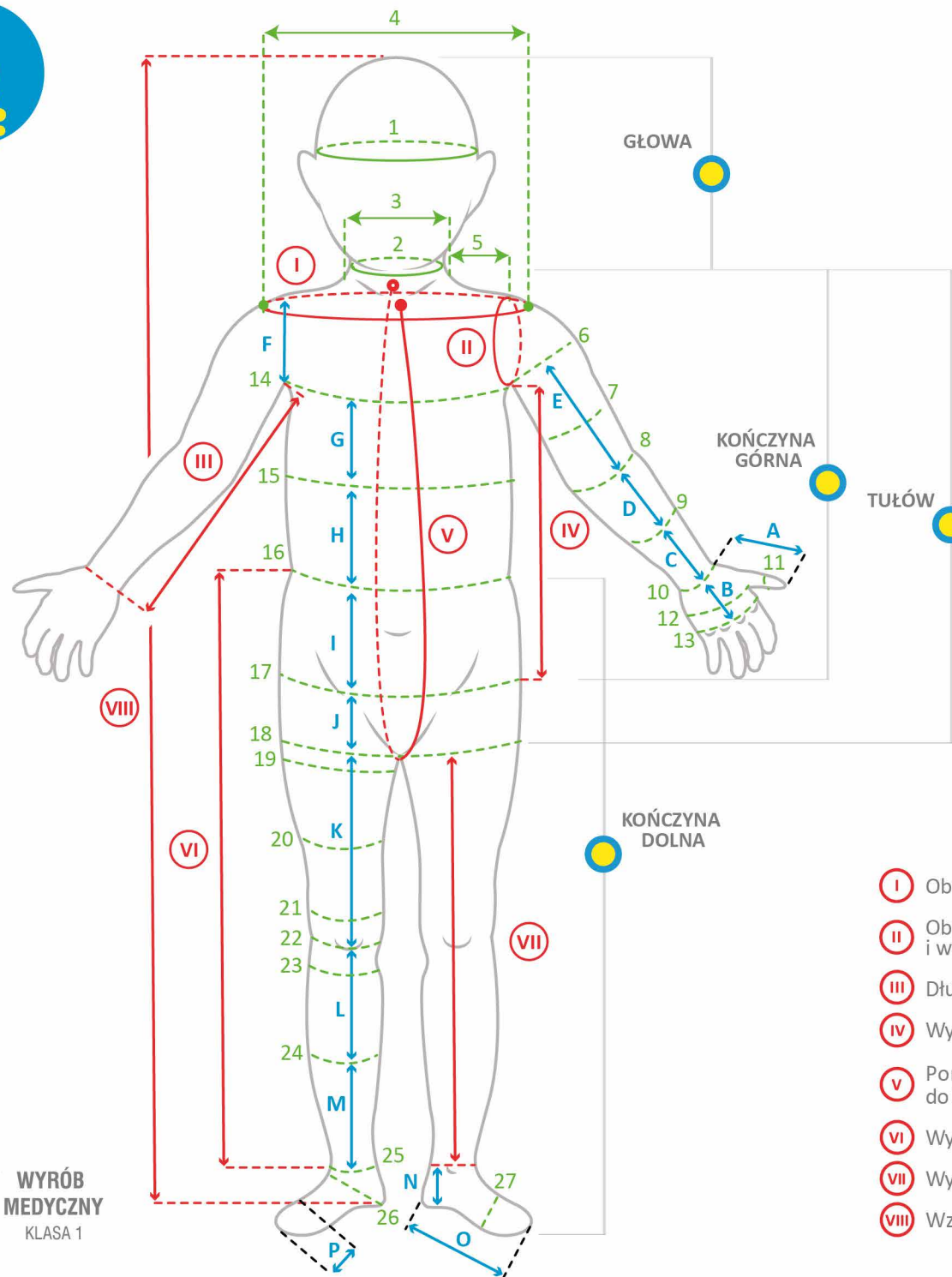


! UWAGA!

- Pomiary tułowia i kończyny górnej należy wykonywać na pacjencie w pozycji leżącej.
- Pomiary bioder i kończyn dolnych należy wykonywać na pacjencie w pozycji stojącej.
- Wszystkie pomiary muszą być podane w centymetrach!
- Jeżeli palec wsunięty pomiędzy ciało dziecka, a wyrób PCO napotyka na wyczuwalny opór, to znaczy że rozmiar wyrobu został dobrany poprawnie.

WAŻNE!

Tylko prawidłowo wypełniona karta pomiarowa jest gwarancją właściwej kompresji wyrobu. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne pomiary!

JAK MIERZYĆ?

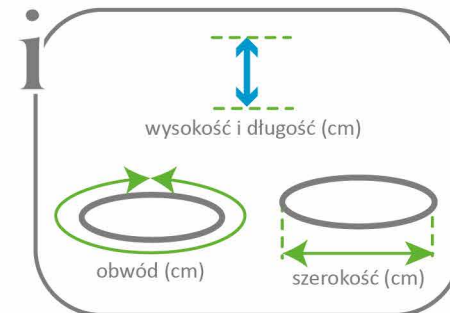

- (I) Obwód ramion na wysokości głowy kości ramiennej
- (II) Obwód stawu barkowego mierzony przez pachę i wyrostek barkowy
- (III) Długość od pachy do nadgarstka
- (IV) Wysokość od pachy do krętarza większego kości udowej
- (V) Pomiar od rękojeści mostka mierzony przez krocze do kręgu szyjnego C7
- (VI) Wysokość od pasa do kostki
- (VII) Wysokość od krocza do kostki
- (VIII) Wzrost pacjenta

WYMAGANE POMIARY

NAZWA ORTEZY	POMIAR OBWODU I SZEROKOŚCI	POMIAR DŁUGOŚCI	POMIAR KONTROLNY	SUWAK
GŁOWA				
PCO-H-01	1			
TUŁÓW				
PCO-T-01	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-02	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-03	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-04	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	
PCO-T-09	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, VIII	Y
PCO-T-10	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18	E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, VIII	Y
PCO-T-11	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18	C, D, E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, VIII	Y
PCO-T-16	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18	F, G, H, I, J	I, II, IV, VIII	Y
PCO-T-17	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18	E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, VIII	Y
PCO-T-18	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18	C, D, E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, VIII	Y
PCO-T-23	2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19	F, G, H, I, J	I, II, IV, V, VIII	Y
PCO-T-24	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 18, 19	E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, V, VIII	Y
PCO-T-25	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 17, 18, 19	C, D, E, F, G, H, I, J	I, II, III, IV, V, VIII	Y
KOŃCZYNA GÓRNA				
PCO-A-01	6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	A, B, C, D, E	III	
PCO-A-02	8, 9, 10, 11, 12, 13	A, B, C, D	III	
PCO-A-03	9, 10, 11, 12, 13	A, B, C	III	
PCO-A-07	6, 7, 8, 9, 10	C, D, E	III	
PCO-A-08	8, 9, 10	C, D	III	
KOŃCZYNA DOLNA				
PCO-L-01	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	I, J, K, L, M	VI, VII, VIII	
PCO-L-02	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24	I, J, K, L	VI, VII, VIII	
PCO-L-03	16, 17, 18, 19, 20, 21	I, J, K	VI, VII, VIII	
PCO-L-08	19, 20, 21, 22, 23, 24, 25	K, L, M	VII	
PCO-L-09	19, 20, 21, 22, 23, 24	K, L	VII	
PCO-L-10	19, 20, 21	K	VII	
PCO-L-11	23, 24, 25	L, M	VII	
PCO-L-12	24, 25, 26, 27	M, N, O, P	VII	

NR.	POMIAR OBWODU I SZEROKOŚCI	OBWÓD	SZEROKOŚĆ
1	OBWÓD GŁOWY		
2	OBWÓD SZYI		
3	SZEROKOŚĆ SZYI		
4	SZEROKOŚĆ RAMION		
5	SZEROKOŚĆ BARKU		
6	OBWÓD RAMIENIA		
7	OBWÓD POMIĘDZY 6 i 8		
8	OBWÓD ŁOKCIA PRZY LEKKO ZGIĘTEJ RĘCE		
9	OBWÓD PRZEDRAMIENIA POMIĘDZY 8 i 10		
10	OBWÓD NADGARSTKA		
11	OBWÓD KCIUKA W STAWIE MIĘDZYPALICZKOWYM		
12	OBWÓD ŚRÓDRĘCZA		
13	OBWÓD W STAWIE ŚRÓDRĘCZNO-PALICZKOWYM		
14	OBWÓD POD PACHAMI		
15	OBWÓD KLATKI PIERSIOWEJ POMIĘDZY 14 i 16		
16	OBWÓD TALII		
17	OBWÓD BIODER		
18	OBWÓD NA WYSOKOŚCI KROCZA		
19	OBWÓD UDA PONIŻEJ PACHWINY		
20	OBWÓD POMIĘDZY 19 i 21		
21	OBWÓD UDA 5 CM POWYŻEJ ŚRODKA RZEPKI		
22	OBWÓD KOLANA		
23	OBWÓD ŁYDKI 5 CM PONIŻEJ RZEPKI		
24	OBWÓD ŁYDKI POMIĘDZY 22 i 25		
25	OBWÓD KOSTKI		
26	OBWÓD PRZEZ PIĘTĘ		
27	OBWÓD ŚRÓDSTOPIA		

DŁUGOŚĆ	
	(cm)
A	
B	
C	
D	
E	
F	
G	
H	
I	
J	
K	
L	
M	
N	
O	
P	

POMIAR KONTROLNY	
I	
II	
III	
IV	
V	
VI	
VII	
VIII	

SUWAK	
	PRZÓD
	TYŁ

LEGENDA: - POMIAR NIEDOSTĘPNY